

Руководство пользователя

Омега Карбон 200

Lamiroom Омега Карбон 200**Электроскутер**

Инструкция по эксплуатации

Знакомство с устройством · Настройка
Эксплуатация · Уход

Перед первым использованием
прочитайте инструкцию полностью.

ИНСТРУКЦИЯ

Содержание

1. Основные сведения	03
2. Безопасность	04
3. Устройство и органы управления	05
4. Подготовка к использованию	08
5. Использование	10
6. Аккумулятор и зарядка	11
7. Подготовка к перевозке	13
8. Уход и хранение	15
9. Если скутер не работает	16
10. Технические характеристики	18
11. Гарантийные обязательства	20

Основные сведения

Омега Карбон 200 — электроскутер с ручным складыванием, съёмным литиевым аккумулятором и цельнолитыми колёсами. Прочитайте инструкцию до первого использования. Если нужна помощь, обратитесь к продавцу.

В исходнике показаны аккумулятор, ключи, зарядное устройство, подлокотники и инструмент. Проверьте комплектацию при получении.

02 / ИНСТРУКЦИЯ

Безопасность

Скутер предназначен для одного человека. Не перевозите пассажиров и не управляйте после употребления алкоголя. Максимальная нагрузка – 125 кг.

Перед поездкой проверьте фиксацию сиденья: попробуйте сдвинуть его вперёд, чтобы убедиться, что фиксатор вошёл в зацепление. Незакреплённое сиденье опасно.

Не изменяйте конструкцию и начальные настройки самостоятельно. Не используйте скутер внутри движущегося транспортного средства.

Предпочтительны ровные городские покрытия и помещения. Неровная дорога снижает комфорт и может затруднить управление. Не спускайтесь задним ходом по неровному уклону. Соблюдайте применимые правила движения.

Во время движения держите ноги на платформе. В исходнике ошибочно предлагается держать руки на подлокотниках; рекомендация по положению рук требует уточнения и не перенесена как команда пользователю. [1]

При вертикальной установке сложенный скутер может быть неустойчивым. Соблюдайте осторожность.

1. Требуется проверки • O200-01

Устройство и органы управления



- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1. Экран | 9. Подлокотники |
| 2. Зарядный разъём | 10. Сиденье |
| 3. Рычаг хода | 11. Регулятор ширины подлокотников |
| 4. Передняя корзина | 12. Фиксатор сиденья |
| 5. Фиксатор сиденья | 13. Аккумулятор |
| 6. Ручка регулировки колонки | 14. Ручка ручного тормоза |
| 7. Переднее колесо | 15. Антипрокидывающее колесо |
| 8. Спинка | 16. Заднее колесо |

Общий вид Омега Карбон 200

На схеме обозначены экран, зарядный разъём, рычаг хода, передняя корзина, фиксаторы сиденья, ручка регулировки колонки, колёса, спинка, подлокотники, регулировка их ширины, аккумулятор и антипрокидывающие колёса.

Устройство и органы управления



Панель управления и зарядный разъём

Орган управления	Назначение
Ключ	Включение и выключение питания
Регулятор скорости	Настройка скорости
Экран	Показания заряда и скорости
Кнопка звукового сигнала	Предупредительный сигнал

Устройство и органы управления

Орган управления	Назначение
Правый рычаг хода	Движение вперёд по обозначению на схеме
Левый рычаг хода	Движение назад по обозначению на схеме

Рычаг свободного хода расположен сзади слева. Вверх — электропривод и тормоз; вниз — ручное перемещение без тормоза. Эти положения отличаются от ряда других моделей Lamiroom.



Положения рычага свободного хода

04 / ИНСТРУКЦИЯ

Подготовка к использованию

Разложите скутер в порядке, обратном складыванию из раздела 7. Поднимите колонку, затяните ручку. Разложите сиденье и спинку. Убедитесь, что фиксатор сиденья вошёл в зацепление.

Подлокотники

Поднимите подлокотник. Измените положение регулировочного винта, чтобы подобрать его угол, и затяните винт комплектным ключом. Подберите удобное положение и закрепите кронштейн ручными винтами.

На общем виде отдельно указана гайка регулировки ширины. Точный порядок изменения ширины и возможная регулировка высоты подлокотников в тексте не раскрыты. Не смешивайте высоту регулировочного винта с высотой всего подлокотника. [2]

2. Требуется проверка • O200-02

04 / ПРОДОЛЖЕНИЕ

Подготовка к использованию



1. Исходное положение подлокотника



2. Поднимите подлокотник



3. Отрегулируйте винт, чтобы изменить угол



4. Затяните винты комплектными ключами



5. Установите нужный угол подлокотника



6. Закрепите стойку подлокотника ручным винтом

Установка и регулировка угла подлокотников

05 / ИНСТРУКЦИЯ

Использование

Включите питание ключом, не касаясь рычага хода. Проверьте экран и выберите небольшую скорость. Направления рычагов показаны на исходной схеме панели.

В исходнике нет полного порядка начала движения, торможения и выключения, а также направления вращения регулятора скорости. Его нужно дополнить по этой модели. [3]

Свободный ход


Для ручного перемещения опустите задний левый рычаг. В этом положении тормоз выключен и скутер не запускается от электропривода. Для езды поднимите рычаг.

В исходнике указано, что при слишком быстром ручном перемещении скутер замедляется. Эта функция не заменяет тормоз и не является разрешением катить скутер на уклоне.

3. Требуется проверка • O200-03

Аккумулятор и зарядка

Скутер оснащён съёмным литиевым аккумуляторным блоком. На панели показан зарядный разъём.

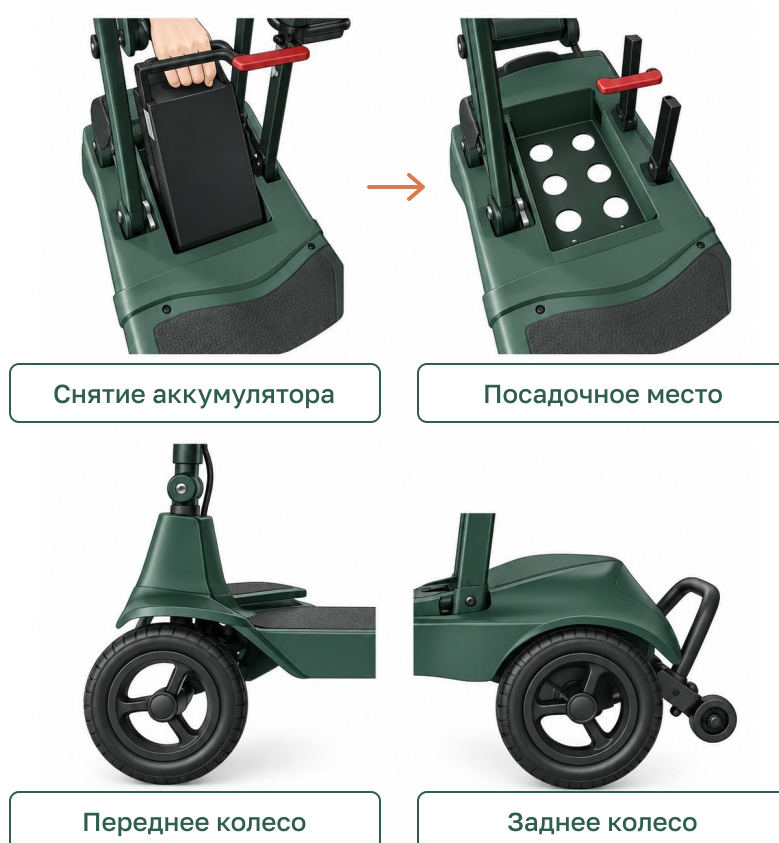

Аккумуляторный блок и цельнолитые колёса

Время зарядки по источнику — 6–10 часов. В файле нет последовательности подключения зарядного устройства, значения индикаторов и подробного порядка снятия блока. Эти сведения нужно получить для этой комплектации. [4]

Аккумулятор и зарядка

При длительном простое снимайте блок, чтобы он не разрядился полностью до следующей зарядки. Период подзарядки при хранении в источнике не указан.

Подготовка к перевозке

Поднимите фиксатор сиденья и потяните каркас сиденья вперёд. Сложите спинку и нажмите на сиденье, чтобы опустить его параллельно основанию.

Ослабьте ручку колонки, повернув против часовой стрелки. Опустите колонку в фиксатор на спинке. Поверните ручку по часовой стрелке, чтобы закрепить колонку.



Разложенный скутер



Сложенный скутер

Вертикальное положение



Поднимите фиксатор сиденья и потяните каркас вперёд

Начало складывания Омега Карбон 200

Подготовка к перевозке



2. Сложите спинку и опустите сиденье параллельно основанию.



3. Ослабьте ручку колонки против часовой стрелки. Опустите колонку в фиксатор на спинке.



4. Затяните ручку колонки по часовой стрелке, чтобы закрепить её.

Складывание спинки и колонки

Для раскладывания выполните действия в обратном порядке. Перед использованием убедитесь, что сиденье разложено и его фиксатор установлен правильно.

Уход и хранение

После использования протирайте скутер и сохраняйте его сухим и чистым. Храните скутер и аккумулятор в сухом месте при подходящей температуре, без тяжёлых погодных воздействий. Точный диапазон температуры в источнике не приведён.

Не допускайте полного разряда блока при длительном простое. Снимайте его на период хранения.

Если скутер не работает

Код определяется числом звуковых сигналов. Если простая проверка не помогла, обратитесь в сервис, чтобы не усугубить неисправность.

Число сигналов	Причина и действие
1	Низкий заряд или плохое соединение блока. Проверьте доступное соединение и зарядите блок
2	Плохое соединение двигателя. Проверка соединений двигателя и контроллера в сервисе
3	Короткое замыкание в цепи двигателя. Обратитесь в сервис
4	Не используется
5	Не используется
6	Зарядное устройство осталось подключено. Отсоедините его перед поездкой

Если скутер не работает

Число сигналов	Причина и действие
7	Рычаг хода не в нормальном положении. Отпустите его; не касайтесь рычага при включении
8	Неисправность контроллера. Проверка соединений и ремонт в сервисе
9	Неверное положение рычага свободного хода. Для езды поднимите рычаг
10	Слишком высокое напряжение аккумулятора. Обратитесь в сервис

Технические характеристики

Параметр	Значение по источнику
Размеры в сложенном положении	1020 × 450 × 400 мм
Размеры в рабочем положении	1020 × 450 × 980 мм
Допустимый уклон	0–12°
Радиус поворота	Не более 1,4 м
Максимальная нагрузка	125 кг
Масса без аккумулятора	12,5 кг
Запас хода	15 км
Скорость	0–6 км/ч
Двигатель	24 В, 200 Вт
Аккумулятор	Литиевый, 24 В, 10 А·ч или 15 А·ч
Время зарядки	6–10 часов

Технические характеристики

Параметр	Значение по источнику
Привод	Задний
Тормоз	Электромагнитный
Передние и задние шины	Цельнолитые полиуретановые, 7 дюймов

Гарантийные обязательства