

Руководство пользователя

Гамма 800

Lamiroom Гамма 800

Электроскутер

Инструкция по эксплуатации

Знакомство с устройством · Настройка
Эксплуатация · Уход

Перед первым использованием
прочитайте инструкцию полностью.

ИНСТРУКЦИЯ

Содержание

1. Основные сведения	03
2. Безопасность	04
3. Устройство и органы управления	05
4. Подготовка к использованию	08
5. Использование	09
6. Аккумулятор и зарядка	11
7. Подготовка к перевозке	12
8. Уход и хранение	14
9. Если скутер не работает	15
10. Технические характеристики	16
11. Гарантийные обязательства	18

Основные сведения

Гамма 800 — электроскутер для одного взрослого человека с ручным складыванием. Прочитайте инструкцию до первой поездки и сохраните её.

02 / ИНСТРУКЦИЯ

Безопасность

Не перевозите пассажиров. Пользуйтесь скутером только в безопасных местах, где это разрешено. Сначала тренируйтесь на открытой площадке вдали от транспортного потока.

Не выполняйте опасные манёвры и не управляйте одной рукой. На неровной дороге снизьте скорость; при необходимости сойдите и перемещайте скутер вручную на безопасном ровном участке.

Избегайте поездок ночью, в дождь, снег и сильный ветер. Не используйте скутер при температуре ниже -5°C . Не езьте по маслу и льду.

Настройте положение руля под свой рост. Перед поездкой проверьте свободу движения деталей и затяжку всех креплений.

Не погружайте скутер в воду глубже 3 см и не мойте струёй. Вода может повредить электронику. Указанная глубина не отменяет рекомендации избегать воды.

В разделе безопасности максимальная скорость указана как 7 км/ч, а в характеристиках — 8 км/ч. Значение для выпуска нужно подтвердить. [1]

1. Требуется проверки • Г800-01

Устройство и органы управления



- 1. Панель управления
- 2. Руль
- 3. Рычаг хода
- 4. Сиденье
- 5. Ручка складывания колонки
- 6. Переднее колесо
- 7. Фара
- 8. Платформа для ног



- 9. Антипрокидывающее колесо
- 10. Двигатель
- 11. Задний фонарь
- 12. Спинка
- 13. Фиксирующий штифт складывания
- 14. Рычаг свободного хода
- 15. Заднее колесо
- 16. Аккумуляторный блок

Общий вид Гамма 800

Номера на исходной схеме: 1 — панель; 2 — руль; 3 — рычаг хода; 4 — сиденье; 5 — ручка складывания колонки; 6 — переднее колесо; 7 — фара; 8 — платформа для ног; 9 — антипрокидывающее колесо; 10 — двигатель; 11 — задний фонарь; 12 — спинка; 13 — фиксирующий штифт складывания; 14 — рычаг свободного хода; 15 — заднее колесо; 16 — аккумуляторный блок.

Устройство и органы управления




Панель управления Гамма 800

На панели показаны регулятор скорости, ключ, звуковой сигнал, кнопка света, индикатор заряда, единицы скорости и состояние света. На схеме также показан разъём USB; его электрические параметры в источнике не указаны.

Правая сторона рычага хода обозначена как движение вперёд, левая — назад. Рычаг свободного хода: горизонтальное положение — езда, вверх — ручное перемещение.

03 / ПРОДОЛЖЕНИЕ

Устройство и органы управления

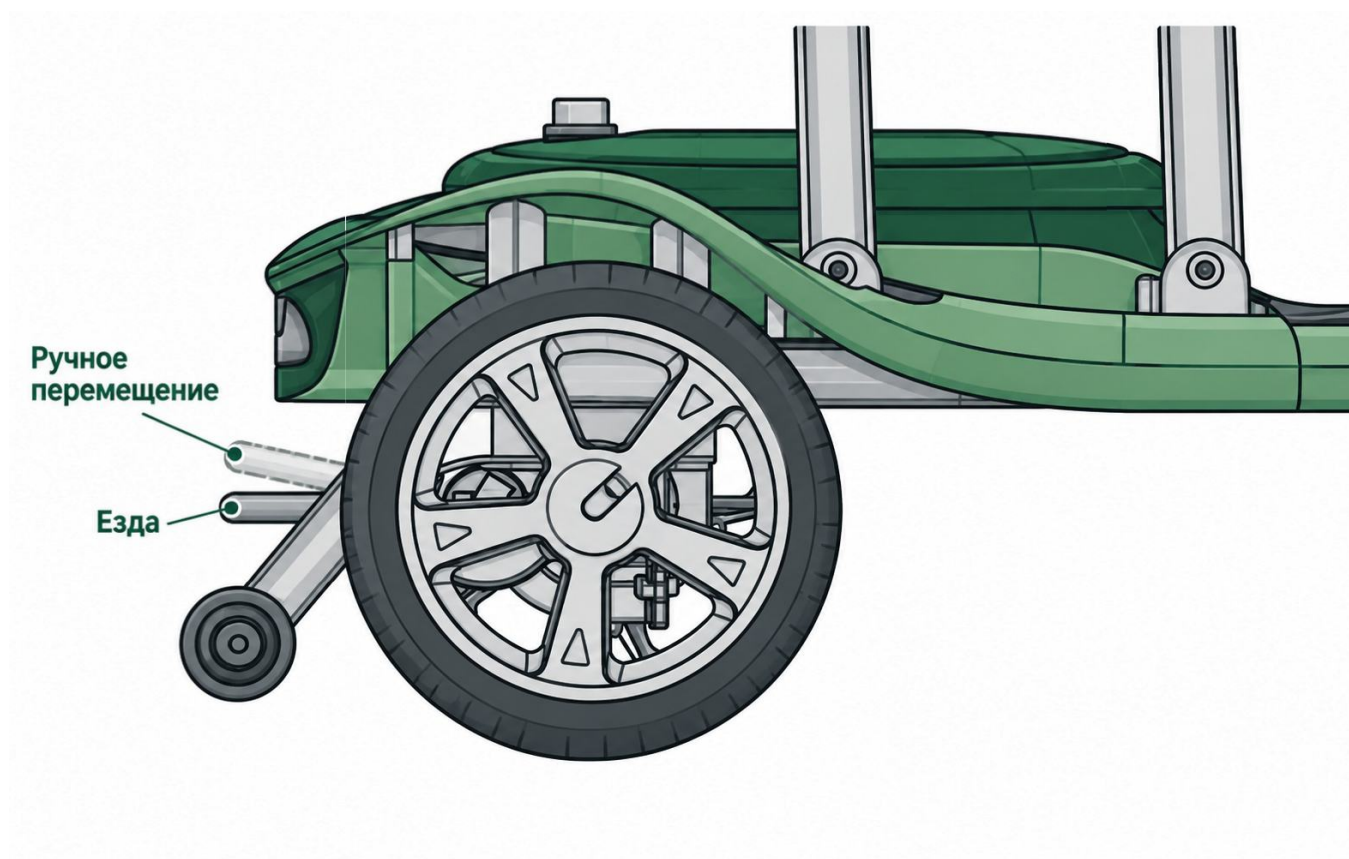

Положения рычага свободного хода

Подготовка к использованию

Разложите скутер по схеме из раздела 7. Установите колонку в удобное положение и закрепите её. Проверьте фиксирующий штифт сиденья и остальные крепления.

Перед первой поездкой полностью зарядите аккумулятор. Проверьте вращение колёс и отсутствие заедания деталей.

05 / ИНСТРУКЦИЯ

Использование

Включите питание ключом. Поворачивайте регулятор скорости по часовой стрелке для увеличения выбранной скорости, против часовой — для уменьшения.

Для смены единиц измерения кратко нажмите кнопку света два раза подряд.

Режим ожидания

После включения ключом панель входит в режим ожидания. После пяти минут бездействия режим ожидания включается снова.

Для пробуждения исходник предлагает слегка отклонить рычаг вперёд. Нужно подтвердить, вызывает ли это только пробуждение панели или сразу движение. До проверки этот способ не оформлен как безопасная пошаговая команда. [2]

Движение и ручное перемещение

Направления рычага показаны на панели. Начинайте движение плавно и держите руль обеими руками. Подробный текст о действии тормоза после отпускания рычага в исходнике отсутствует — требуется дополнение Г800-03.

2. Требует проверки · Г800-02

Использование

Для ручного перемещения рычаг свободного хода поднимается вверх; для езды возвращается в горизонтальное положение. В исходнике не раскрыты отдельные меры безопасности переключения – их нужно подтвердить для этой модели.

Аккумулятор и зарядка

Используйте комплектный литиевый аккумулятор и соответствующее ему зарядное устройство. Не используйте зарядное устройство для неподходящего аккумулятора.

Откройте крышку зарядного разъёма. Подключите зарядный штекер к разъёму, затем устройство к розетке. Красный индикатор означает зарядку, зелёный — полный заряд. После появления зелёного индикатора отключите зарядное устройство.

В тексте указано время 6–7 часов, в таблице — 7–8 часов. Оба значения сохранены для сверки, единое время не выбрано. [3]

Полностью зарядите новый блок перед первым использованием. В исходнике допускается подзарядка в любое время. При длительном простое снимайте блок, чтобы избежать расходования заряда.

В исходнике заявлены не менее 500 циклов зарядки и более 1000 при обычном использовании. Эти показатели не определяют состояние конкретного блока. Если после зарядки время работы заметно сокращается, обратитесь к продавцу для проверки и замены.

Подготовка к перевозке




1. Исходное положение



2. Спинка сложена



3. Сиденье опущено

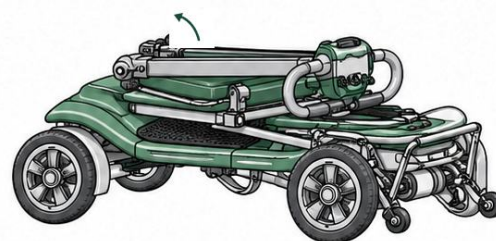

4. Колонка сложена

Последовательность складывания Гамма 800

На схеме показано: сначала сложить спинку, затем освободить фиксацию и опустить сиденье; далее ослабить ручку колонки и опустить колонку. Не переносите сюда процедуры вертикального складывания рамы других моделей.

Подготовка к перевозке



Последовательность раскладывания Гамма 800

Раскладывание показано в обратной последовательности: поднять и закрепить колонку, поднять и зафиксировать сиденье, разложить спинку.

Схема содержит стрелки, но нет полного текстового описания освобождения штифта и направления работы ручки. Уточните эти действия перед выпуском. Рисунки сохранены целиком для сверки. [4]

4. Требуется проверки • Г800-05

Уход и хранение

Поддерживайте скутер в чистоте. Не оставляйте надолго под прямым солнцем или в сильной сырости. Перед поездкой проверяйте крепёж и подвижные узлы.

Каждые 3–4 месяца наносите небольшое количество смазки на механизм складывания.

Перед длительным хранением полностью зарядите аккумулятор, выключите питание и снимите блок. Подзаряжайте его каждые 30 дней.

Если скутер не работает

Не ремонтируйте скутер самостоятельно. При неисправности обратитесь к продавцу или в сервис.

Код	Значение
E1	Неисправность датчика Холла двигателя
E2	Неисправность силового MOS-транзистора
E3	Неисправность рычага хода
E5	Пониженное напряжение
E7	Неисправность двигателя
E8	Сигнал об отключённом электромагнитном тормозе

Технические характеристики

Параметр	Значение по источнику
Размеры в рабочем положении	1025 × 450 × 950 мм
Размеры в сложенном положении	1025 × 450 × 440 мм
Масса	15,7 кг
Максимальная нагрузка	120 кг
Уклон	20 процентов
Запас хода	15 км
Аккумулятор	Литиевый, 24 В, 10,4 А·ч
Двигатель	Бесщёточный постоянного тока в заднем приводе
Номинальная мощность двигателя	180 Вт
Частота вращения	195 ± 5 об/мин
Напряжение двигателя	24 В

10 / ПРОДОЛЖЕНИЕ

Технические характеристики

Параметр	Значение по источнику
Крутящий момент	3 Н·м
Вход зарядного устройства	110–220 В

Уклон 20 процентов не равен 20 градусам. Скорость и время зарядки требуют проверки Г800-01 и Г800-04. [5]

5. Требуется проверки · Г800-01, Г800-04

Гарантийные обязательства